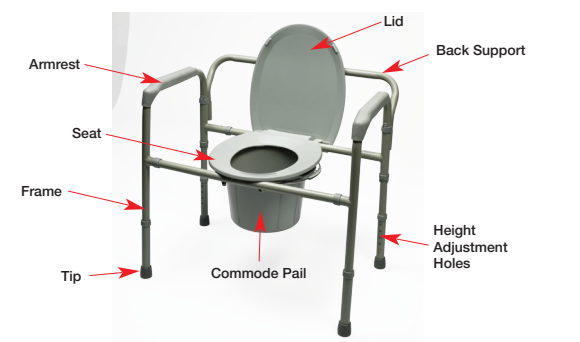


384X178
Hantag to be printed with 4 Color High Gloss Ink plus UV coating on 80 LB. White Stock.
Red guides are to indicate folds and layout only. They do not print.
Score all folds
Drill holes where indicated, 4mm
Use a CLEAR 25.4 MM round perforated waffer to seal hangtag

178 mm

91 mm		101 mm 4mm Hole Drilled		101 mm		91 mm	
Garantía Limitada de por Vida Calidad es el sello de todos de los productos de Lumex®. De confianza por profesionales de cuido de salud y usuarios por más de 50 anos, Lumex tiene una línea completa de asistencia para pacientes y asientos especializada de asistencia sanitaria. Los productos de Lumex son diseñados y hechos a estándares precisos y son revisados cuidadosamente antes de envió. La Garantía Limitada de por Vida es un expresión de nuestro confianza en los materiales y factura de nuestros productos. Somos dedicados a proveer productos que pueden dar anos de servicio fiable a nuestros clientes. GF Health Products, Inc. garantiza las partes específicos de estos modelos de Lumex escritos en el forro de este “hangtag” para la vida del producto sobre ser libre de defectos en materiales y factura cuando usado por el propósito entendido, sobre condiciones normales, y pródigo que el producto reciba cuido apropiado. Partes cubiertos debajo de esta garantía incluye: marco, soldadura, tornillos, componentes de posicionar el marco. Artículos específicos “excluidos” de esta garantía de cual quiere tipo: “TODAS” otras partes no mencionados específicamente arriba. La garantía no se extenderá a componentes no durables como accesorios punta, cuales son sujetos a desgasto normal y requieren remplace periódico. Esta garantía no incluye cargos de labor incurridos con instalación de partes de reemplazo o cargos de transporte o carga asociados al fabricante. Si hay un defecto en el producto que se cubra por la garantía, nosotros, a nuestra opción, podemos reparar o reemplazar el producto. Las garantías que figuran en este documento contiene todas las declaraciones y garantías en relación con la materia objeto de este documento, y sustituyen todas las negociaciones previas, acuerdos y entendimientos con respecto a la misma. El receptor del presente documento reconoce y declara que no ha basado en ninguna declaración, afirmación, garantía, contrato de garantía u otra promesa, excepto los establecidos en este documento. Para información adicional de este producto de Lumex o esta garantía, por favor de llamar a su distribuidor autorizado de GF Health Products, Inc.		LUMEX® A Graham-Field Brand Features: • Versatile 3-in-1 design can be used as a bedside commode, raised toilet seat, or toilet safety frame • Welded steel construction provides strength and stability • Folds for convenient storage and travel • Sturdy plastic seat snaps-on easily • Comes complete with commode pail, cover and splash guard • Designed to meet the requirements of HCPCS code: E0163 • Limited Lifetime Warranty Specifications: • 30" – Overall width • 14" – Seat Width • 16 ½" – Seat Depth • 17 ½" - 21 ½" – Seat Height • 650lb Weight Capacity Características: • Diseño 3-en-1 que es versátil puede ser usado como inodoro de cama, asiento de inodoro elevado, o marco de seguridad de inodoro • Marco construido de acero provee esfuerzo y estabilidad • Se dobla completamente para almacenaje conveniente y para viajar • Asiento plástico es durable y se monta fácilmente • Viene completamente con balde de inodoro, tapa y salpicadera • Diseñando para reunir los requisitos del código HCPCS: E0163 • Garantía Limitada de por Vida Especificaciones: • 30" – Anchura total • 14" – Anchura del asiento • 16 ½" – Profundidad de asiento • 17 ½" - 21 ½" – Altura de Asiento • Capacidad de Peso de 650lb © 2010, GF Health Products, Inc., 2935 Northeast Parkway, Atlanta, Georgia 30360. Made in China. www.grahamfield.com Specifications subject to change without notice Especificaciones son sujetas a cambio sin aviso GF1000063RevA10		LUMEX® A Graham-Field Brand Bariatric Folding Steel Commode Inodoro Plegable de Acero Item 7109A-2  User Instructions and Warranty Information Important: Read Before Use Instrucciones e Informacion de la Garantia Importante: Lea Antes de Uso 		Lifetime Limited Warranty Quality is the hallmark of all Lumex® products. Trusted by healthcare professionals and end-users for over 50 years, Lumex features a full line of patient aids and specialty healthcare seating. Lumex products are designed and built to precise standards and are carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products. We are dedicated to providing products that will give our customers years of dependable service. GF Health Products, Inc. hereby warrants specific parts of the Lumex models listed on the cover of this hangtag for the lifetime of the product against defective workmanship and/or material defects when used for the purpose intended, under normal conditions, and provided the product receives proper care. Parts covered under the lifetime warranty include: frame, welding, screws, and frame locking components. Specific items “excluded” from this warranty of any kind are: “ALL” other parts not specifically listed above. The warranty does not extend to non-durable components, such as tips, which are subject to normal wear and require periodic replacement. The warranty does not include any labor charges incurred in replacement part(s) installation or any associated freight or shipping charges to the manufacturer. Should a product defect that is covered by this warranty arise, we will, at our option, repair or replace the product. The warranties contained herein contain all the representations and warranties with respect to the subject matter of this document, and supersede all prior negotiations, agreements and understandings with respect thereto. The recipient of this document hereby acknowledges and represents that it has not relied on any representation, assertion, guarantee, warranty, collateral contract or other assurance, except those set out in this document. For additional information on this Lumex product or this warranty, please contact an authorized GF Health Products, Inc. Distributor.	
Instructions for Use – Please Read All Instructions Before Use. Setup 1. Remove frame, seat, lid, pail, cover, and splash guard from carton. 2. Attach front support bar to arm rest by depressing the locking button and sliding into the armrest channel guide. When locking button locks into place an audible click can be heard. Repeat for other side. 3. Attach seat and then lid to rear support of frame. In the upright position, place splash shield or pail and cover in frame. <i>NOTE: When installing the seat onto the frame, make sure that the seat is evenly spaced between the side frames to ensure proper stability.</i> <i>NOTE: Push down firmly until the seat snaps into place.</i> <i>NOTE: DO NOT use excessive force when installing the seat and lid.</i> Adjusting Commode Height 1. Depress the height adjustment button and slide the lower leg upward or downward until the height adjustment button is fully engaged in the desired hole. <i>NOTE: An audible “click” will be heard.</i> 2. Repeat for other 3 legs. <i>CAUTION: Ensure that all four commode legs are adjusted to the same height, and that all height adjustment buttons protrude fully through adjustment holes before use.</i> Inserting Back Bar 1. Remove back bar from carton. 2. Insert back bar into channel guides on back of commode until back bar push buttons protrude fully through channel guide holes (you will hear an audible click). Use Commode over Toilet 1. Set commode to desired height (described in previous steps). 2. Remove commode pail and lid. 3. Position splash guard in place onto pail supports. 4. Remove back support (described in previous steps). 5. Lift toilet bowl seat. 6. Place commode over toilet with splash shield positioned over the center of the toilet bowl. Commode is now ready for use. Clean seat and splash guard with disinfectant after each use. Use as Bedside Commode 1. Set commode to desired height (described in previous steps). 2. Lift commode seat and lid and place Commode pail onto pail supports. Ensure that pail is properly positioned below commode opening. 3. Place commode seat down. Commode is now ready for use. 4. When user is finished using commode, place commode pail lid over commode pail to contain odors. 5. Remove pail and lid simultaneously to empty pail. Clean seat and pail with disinfectant after each use. 		Maintenance • Use a mild soap and water solution, rinse with clear water, then dry with a soft cloth. Ensure that product is well rinsed before using. • Never use organic solvents, abrasive cleaners, or scouring pads on any part of the product. • To guarantee the best service from your product, always specify Lumex replacement parts, available from your GF Health Products, Inc. authorized distributor. For more information regarding GF Health Products, Inc. products, parts and services, please contact your distributor or visit us online at www.grahamfield.com. Safety Guidelines – Please Read Before Use NOTE: Check ALL parts for shipping damage. If shipping damage is noted, DO NOT use. Contact carrier/dealer for further instruction. WARNING WARNING: DO NOT use this product without first completely reading and understanding these instructions and any additional instructional material such as owner's manuals, service manuals or instruction sheets supplied with this product. If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to use this equipment - otherwise, injury or damage may occur. WARNING: Users with limited physical capabilities should be supervised or assisted when using the commode. WARNING: This product has a maximum weight capacity of 650 lbs. WARNING: GF Health Products, Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly, or use of this product. WARNING: Leg extensions with rubber tips MUST be in contact with the floor at all times. WARNING: Ensure that the push buttons fully protrude through the same height adjustment hole of each leg extension. This ensures that the leg extensions are securely locked in position and that an even height adjustment is achieved. WARNING: Make sure that all attaching hardware, screws, nuts and/or bolts are tight at all times. WARNING: Inspect rubber tips on the leg extensions for rips, tears, cracks or wear or if they are missing. Replace them IMMEDIATELY if any of these conditions exist. WARNING: The commode seat MUST be installed before sitting on the commode. WARNING: If components are damaged or missing, contact your GF Health Products, Inc. distributor immediately.		Instrucciones Para Uso – Lea y Entiende Todas Las Instrucciones Antes de Uso. Montaje 1. Saque el marco, asiento, tapa, balde, tapa del balde y el escudo de salpicadura del cartón. 2. Sujeta la barra delantera al apoyabrazos empujando en el botón de cerradura y poniendo en la guía de canal del apoyabrazos. Cuando las cerraduras están en posición, se puede oír un “clic” audible. Repite por el otro lado. 3. Sujeta el asiento y después la tapa al soporte trasero del marco. En la posición vertical, coloque el balde o “splash guard” en el marco. <i>Nota: Cuando estas instalando el asiento en el marco, asegure que el asiento esta puesto dentro el centro de los marcos del lado para asegurar estabilidad apropiado.</i> <i>Nota: Apreté firmemente hasta que el asiento se asegurar en puesto.</i> <i>Nota: NO utilice esfuerzo excesivo cuando instalando el asiento y la tapa.</i> Ajustando la Altura del Inodoro 1. Apriete el botón de ajustamiento de altura y deslice la parte inferior de la pata hacia arriba y abajo hasta que el botón de ajustamiento esta asegurado en el hueco deseado. <i>Nota: Se oye un “clic” cuando esta puesto.</i> 2. Repita para las otras 3 patas. <i>CAUCION: Asegure que todas cuatros patas están ajustados a la misma altura y que todos los botones de ajustamiento sobresalen por los huecos de ajustamiento antes de uso.</i> Instalando el Agarre de Respaldo 1. Remueve el agarre de respaldo del cartón. 2. Inserta el agarre de respaldo en las guías de canal en la parte trasera del inodoro hasta que el los botones de apretar sobresalen completamente por los huecos de la guía de canal (si va oír un “clic” audible). Utilizar el Inodoro Sobre el Inodoro de Casa 1. Ajuste el inodoro a la altura deseada (descrito en los pasos anteriores). 2. Retira el balde y la tapa del inodoro. 3. Posicione el escudo de salpicadura en sitio en los soportes de balde. 4. Retira el soporte de espalda (descrito en los pasos anteriores). 5. Levante el asiento de la taza de servicio. 6. Ponga el inodoro sobre la taza de servicio con el escude de salpicadura sobre el centro de la taza de servicio. El inodoro esta listo para utilizar. Limpie el asiento y el escude de salpicadura con desinfectante después de cada uso. Utilizar como Inodoro de Uso de Dormitorio 1. Ajuste el inodoro a la altura deseada (descrito en los pasos anteriores). 2. Levante el asiento y la tapa y ponga el balde del inodoro en los soportes del balde. Asegure que el balde esta posicionado apropiadamente debajo de la abertura del inodoro. 3. Ponga el asiento del inodoro abajo. El inodoro esta listo para uso. 4. Cuando has terminado de usar el inodoro, ponga la tapa del balde para contener olor. 5. Retira el balde y la tapa al mismo tiempo para vaciar el balde. Limpie el asiento y balde con desinfectante después de cada uso. 		MANTENIMIENTO • Utilice una solución de jabón suave y agua, enjuague con agua limpia y seca con una toalla suave. Asegure que el inodoro esta enjuagado bien antes de uso. • Nunca utilice solventes orgánicos, limpiadores abrasivos en cual quiere parte de este inodoro. • Para garantizar el servicio mejor de su inodoro, siempre pide partes de reemplace de Lumex si son disponible por so distribuidor de GF Health Products, Inc. Para mas información sobre su producto, partes o servicio de GF Health Products, Inc, por favor de llamar a su distribuidor o visítenos online en www.grahamfield.com. Directriz de Seguridad – Por Favor De Leer Antes de Uso NOTA: Examine to das las partes por daño en transporte. Si hay daño en transporte, NO UTILICE. Llame a su empresa de transporte para instrucciones. ADVERTENCIAS ADVERTENCIA: NO DEBE UTILIZAR este producto sin primero leer y entender estas instrucciones y cual quiere otro material como el manual de usuario, manual de servicio hoja de instrucción suministrado con este producto. Si no puedes entender las advertencias, cauciones o instrucciones, llame a su profesional de cuido de salud, distribuidor o personal técnica antes de tratar de usar este equipo – o si no, herida o daño puede ocurrir. ADVERTENCIA: Usuarios con capacidades físicos puede ser supervisados o asistidos cuando utilizar el inodoro. ADVERTENCIA: Este producto tiene una capacidad máxima de peso de 650 lbs. ADVERTENCIA: GF Health Products, Inc. no asume ninguna responsabilidad por daño o herida causado por instalación, ensamblaje o uso impropio de este producto. ADVERTENCIA: Extensiones de patas con puntas de goma TIENEN que estar en contacto con el piso todo el tiempo. ADVERTENCIA: Asegure que los botones de apretar sobresalen completamente por los mismos huecos de ajustamiento de altura de cada extensión de pata. Esto asegura que las extensiones de pata están asegurados en posición y que el ajustamiento de altura esta uniforme. ADVERTENCIA: Asegure que la ferreteria, tornillos y perillos están apretados todo el tiempo. ADVERTENCIA: Examine las puntas de goma en las extensiones de patas para grietas o desgasto o si faltan. Reemplace IMMEDIAMENTE si estas condiciones existen. ADVERTENCIA: El asiento del inodoro TIENEN que estar instalado antes de sentarse en el inodoro. ADVERTENCIA: Si los componentes están dañados o si faltan, llame a su distribuidor de GF Health Products, Inc. inmediatamente.	

Outside

Inside

Fold

Inside Front Cover

Fold

Inside Back Cover

Fold